



## Instrukcja obsługi

# Waga elektroniczna z analizą składu ciała



OKOK International

### Waga i Smartfon

#### Waga współpracuje z mobilną aplikacją OKOK International

Mac®, iPad® oraz iPod touch®, są chronionymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. ANDROID™, jest marką zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajach.



### Jak rozpocząć

#### 1. Instalacja baterii

Otwórz pokrywę baterii, włóż baterie zachowując odpowiednią polaryzację. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych.

#### 2. Instalacja aplikacji

Zeskanuj kod QR widniejący powyżej lub wyszukaj i zainstaluj aplikację „OKOK International” z Appstore lub GooglePlay.

#### 3. Rejestracja

Włącz komunikację Bluetooth w smartfonie, otwórz aplikację “OKOK International” Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu telefonu, aby się zarejestrować.

#### 4. Pierwsze ważenie

Przy pierwszym pomiarze dokonywanym z użyciem nowego egzemplarza wagi aplikacja OKOK International odczyta jedynie wagę ciała. Jest to sytuacja normalna, którą nie należy się przejmować. Przy kolejnych pomiarach wszystkie wybrane parametry będą widoczne

## Waga sprawdza 12 wskaźników Twojego zdrowia

### 1. Osiem wskaźników podstawowych



Zawartość tkanki tłuszczowej



Zawartość wody



Zawartość tkanki mięśniowej



Zawartość tkanki kostnej



BMR



Waga



BMI



Zawartość tłuszczu trzewnego

### 2. Cztery wskaźniki opcjonalne



Białko




Stopień otyłości



Wiek biologiczny



Waga bez tkanki tłuszczowej

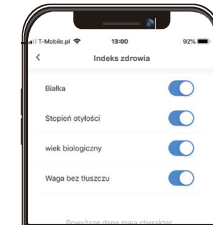

## Waga dla 8 użytkowników

Waga wraz z aplikacją może być używana przez 8 użytkowników, którzy mogą korzystać z jednego zarejestrowanego profilu

## Docelowa waga

Użytkownicy mogą ustalić i zapisać w aplikacji swoją docelową wagę ciała. Ułatwia to ułożenie planu osiągnięcia tego celu.

## Uwaga:

1. Proszę się upewnić, że w czasie pomiaru zachowany zostaje dobry kontakt między bosymi stopniami elektrodami znajdującymi się na powierzchni platformy wagi. W odmiennym przypadku waga zmierzy jedynie masę ciała.
2. Proszę się upewnić, że w czasie pomiaru waga stoi na płaskiej twardej i równej powierzchni. Proszę unikać ustawiania wagi na dywanach i miękkich powierzchniach.
3. Mokra platforma wagi jest powierzchnią śliską. Upewnij się proszę przed pomiarem, że zarówno platforma wagi oraz Twoje stopy są suche.
4. Waga nie jest wodoodporna. Proszę nie wystawiać jej na działanie wilgoci.
5. Proszę czyścić wagę lekko wilgotną ściereczką. Proszę nie używać żadnych chemicznych ani ściernych substancji.
6. Jeśli waga nie jest używana przez dłuższy czas proszę wyjąć z niej baterie.
7. Waga przeznaczona jest do użytku domowego, w pomieszczeniach zamkniętych
8. Waga nie służy do zabawy, proszę tak nadzorować dzieci aby nie bawiły się wagą.



rok zał. 1949  
**TECH - MED**<sup>®</sup>  
TECHNIKA MEDYCZNA  
B. WOJCIK s-ka jawną

dla:

**HOME WORLD Piotr Wojcik**  
Ul. Sarmacka 28B/12  
02-972 Warszawa, Polska  
www.home-world.pl

